

お客様各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

《変更日》 令和7年3月31日(月) 受付分より

《変更内容》①


総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.5	0425	尿素窒素 (UN)	検査方法の表記	ウレアーゼ GLDH・UV 法 (アンモニア消去)	ウレアーゼ GLDH アンモニア消去法
	0432			ウレアーゼ GLDH・ICDH・UV 法 (アンモニア消去)	
			最小報告値	随時尿：1.6 mg/dL 未満	設定なし

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 血清および尿：検査方法をより適正な表記に変更  
尿：現行試薬の製造中止に伴う試薬変更

《相関図》

尿素窒素 (UN) 尿

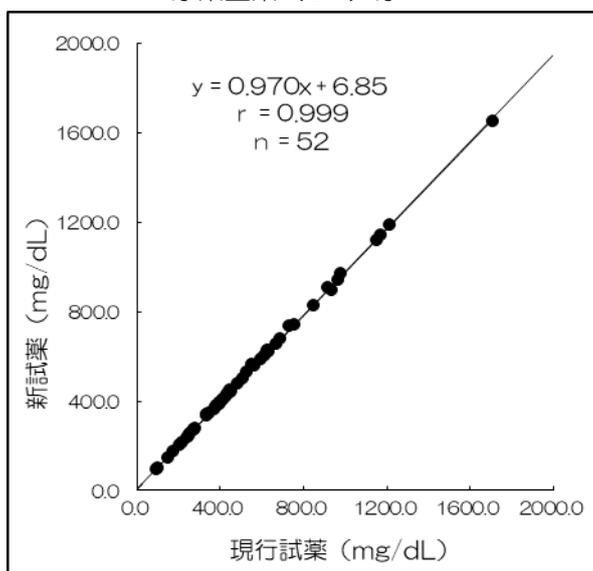

《変更内容》②


総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.14	O400	亜鉛 (Zn) 血清	検査方法	5-Br-PAPS 法	Nitro-PAPS 法
			最小報告値	3 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 未満	6 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 未満
			備考	指定容器以外は使用不可 強溶血で高値傾向を示す	指定容器以外は使用不可 溶血の影響あり

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 試薬安定性の向上および溶血の影響軽減のため

《相関図》

亜鉛 (Zn) 血清

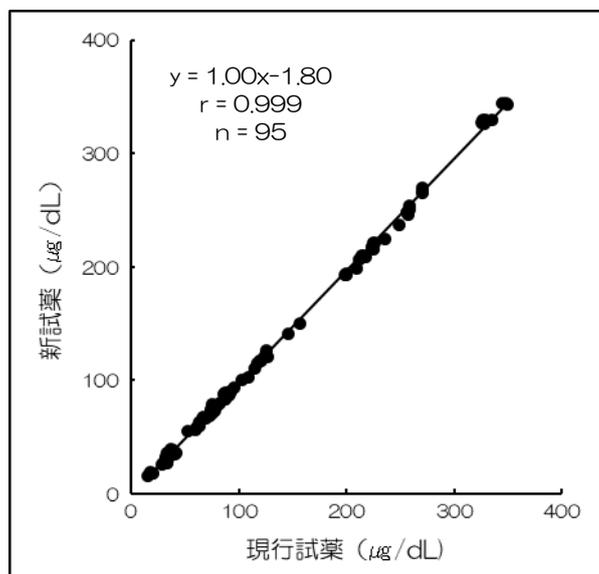


《変更内容》③

総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更内容	変更後	変更前
P.58	1397	梅毒定性 RPR 法	測定試薬	LASY オート RPR (デンカ株式会社)	メディエース RPR (極東製薬工業株式会社)
	1398	梅毒定量 RPR 法			

※ その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》 低値再現性および直線性向上を目的とした試薬へ変更

《相 関 図》

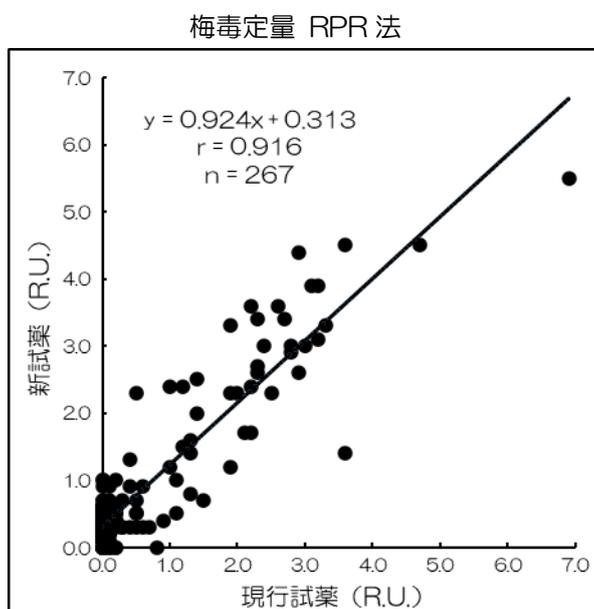

《判定一致率》

判定結果		現行試薬		
		陽性	陰性	合計
新試薬	陽性	37	4	41
	陰性	3	223	226
	合計	40	227	267

全体一致率 (%)	97.4
陽性一致率 (%)	92.5
陰性一致率 (%)	98.2